



LANÇAMENTO

Novo Analisador Hematológico da AmaMedical

AMA H - 6022

Diferencial em 3 Partes

AmaMedical Soluções em Saúde


Av. Hilário Pereira de Souza, 406, Centro Empresarial, Torre 2, 28º andar
Industrial Autonomistas, Osasco - SP, 06010-170

[vendas@amamedical.com.br](mailto: vendas@amamedical.com.br)

(11) 4384-2494

Especificações técnicas

O Ama H - 6022 é um analisador hematológico de 3 partes, projetado para realizar até 60 testes por hora, oferecendo uma solução eficiente e precisa para laboratórios que necessitam de medições confiáveis. Com sua tecnologia avançada Sweep-Flow, este analisador garante precisão na contagem de plaquetas (PLT) mesmo em amostras de baixo valor.

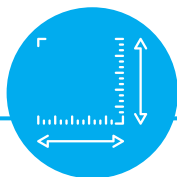

Medição precisa para PLT de baixo valor

A tecnologia Sweep-Flow assegura a contagem precisa de amostras baixas de PLT, proporcionando resultados confiáveis e consistentes.




Baixo custo operacional

Utiliza apenas dois reagentes de rotina, com baixo consumo por teste, otimizando os custos operacionais.



LCD de 10,4 polegadas

Equipado com uma tela colorida e sensível ao toque, eliminando a necessidade de um PC externo e facilitando a visualização e operação do equipamento.

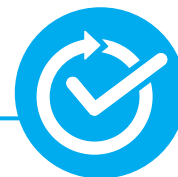

Fácil de usar

Interface amigável com menus intuitivos, permitindo a operação com um toque para iniciar testes e um clique para remover erros.

Volume de amostra

10ul

Memória de dados

- Até 100.000 resultados

Parâmetros

21 Parâmetros reportáveis:

WBC, Lym#, Mid#, Gran#, Lym%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC
3 histogramas (WBC, RBC, PLT)

Interface

- 1 porta LAN , 4 portas USB
- Porta RS232 (Opcional)

Taxa de transferência

- 60 testes/hora

Ambiente de trabalho

- Potência: ac100-240V, 50/60Hz
- Temperatura: 10-30°C Umidade: 20-85% Pressão do ar: 70-106KPa

Performance

| Parâmetro | Faixa de linearidade | Transferencia | CV |
|------------|----------------------------|---------------|-------|
| Leucócitos | 0-300x10 ⁹ /L | ≤0.5% | ≤2.0% |
| RBC | 0-8x10 ¹² /L | ≤0.5% | ≤1.5% |
| HGB | 0-250g/L | ≤0.5% | ≤1.5% |
| PLT | 0-3000 x10 ⁹ /L | ≤1.0% | ≤4.0% |

Impressão

- Impressora térmica integrada ou impressora externa

Tamanho/Peso

- C*L*A=411*315*416(mm)
- Peso: 26kg

Requisito de energia

- a.c.100-240V, 50/60Hz

AmaMedical Soluções em Saúde

Av. Hilário Pereira de Souza, 406, Centro Empresarial, Torre 2, 28º andar
Industrial Autonomistas, Osasco - SP, 06010-170

[vendas@amamedical.com.br](mailto: vendas@amamedical.com.br)

(11) 4384-2494